


RS200 PRO+ – Das validierbare
Durchlaufsiegelgerät

icmedical

Hallo
Zukunft!

Schneiden
Verpacken
Versiegeln
in einem.

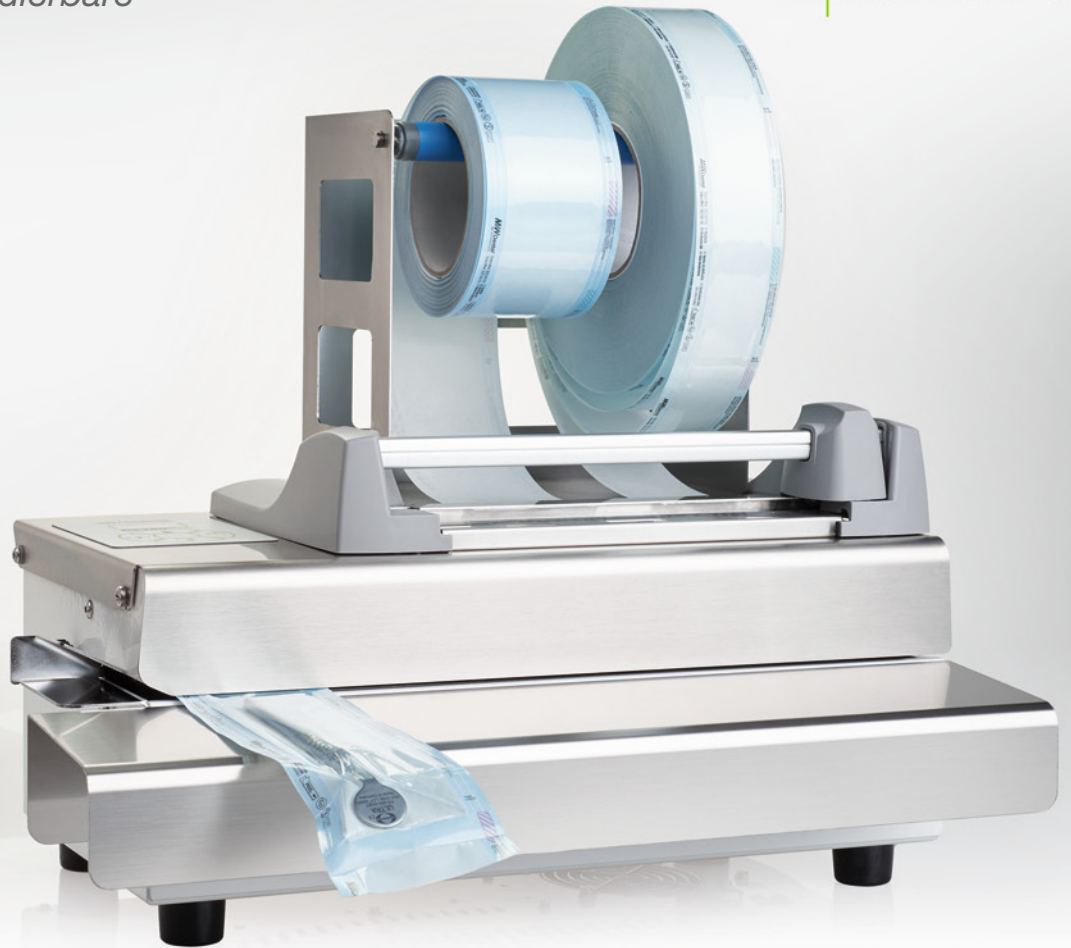

Ihre unschlagbaren Vorteile auf einen Blick:

Kompaktes Siegelgerät inklusive Rollenhalter und Schneidevorrichtung

Intuitive Bedienung über das geschlossene IC Bedienfeld

Regulierbare Temperatur und Durchlaufgeschwindigkeit

USB Schnittstelle zur Dokumentation

RS200 PRO+

Ideal für den Verpackungsprozess
in Ihrer Praxis – das kompakte
Siegelgerät inklusive Rollenhalter
und Schneidevorrichtung

Einfache Bedienung

Auf dem gut ablesbaren IC Display erkennen
Sie alle notwendigen Parameter und können
mit dem übersichtlichen Menü alle Einstel-
lungen schnell und einfach vornehmen. So
können Sie z.B. die Siegeltemperatur nach
Ihren Folien einstellen und die Durchlaufge-
schwindigkeit nach Ihrem Prozess ausrichten.

Die Dokumentation via USB-Schnittstelle
erspart Ihnen den Kauf teurer Zusatzsoftware.



Die Kompaktklasse für Ihren Praxisalltag!



Effizienz im Praxisalltag

Mit einem Durchlaufsiegelgerät können in kurzer Zeit Instrumente gemäß den aktuellen Anforderungen sicher und schnell verpackt werden. Sparen Sie Zeit und Mühe im Verpackungsprozess. Das kompakte Siegelgerät ist bereits mit einem Halter für Sterilisationsrollen sowie einer Schneidevorrichtung ausgestattet, dies ermöglicht einen effizienten Verpackungsprozess.

Sicherheit und rechtliche Anforderung

Der Verpackungsprozess ist Teil der Aufbereitung von Medizinprodukten. Ein validiertes Aufbereitungsverfahren im Sinne der Medizinprodukte-Betreiberverordnung ist damit erforderlich. Mit dem RS200 PRO+ erfüllen Sie Vorgaben und gewährleisten eine rechtssichere Aufbereitung nach EN ISO 11607-2 im Verpackungsprozess.

Die Dokumentation der relevanten Parameter erfüllt den Anspruch der Reproduzierbarkeit und ermöglicht die Kontrolle des Verpackungsprozesses. So werden jeweils Datum, Uhrzeit, Software-Version, Geräte-ID, Chargennummer, Temperatur, Durchlaufgeschwindigkeit, Anpressdruck, Benutzer und ggf. Fehler auf dem Protokoll abgelegt.



	RS200 PRO+
Typbezeichnung	RS200 PRO+ inkl. Rollenhalter und Schneidevorrichtung
Artikelnummer	305 001
Geräteabmessungen (HxBxT)	18,1 × 47,3 × 23,5 cm
Rollenhalterabmessung (B)	20 cm
Temperaturbereich	10°C – 200°C (±1°C)
Durchlaufgeschwindigkeit	5 m/min – 6,5 m/min
Siegelnahtbreite	12,5 mm (gerillt)
Siegelrand stufenlos	0 mm – 30 mm
Schnittstelle	USB
Dokumentation	USB Stick
Stromanschluss	230...240 V, 50-60 Hz
Gewicht	12,5 kg
Maximale Leistungsaufnahme	500 W
Lieferumfang	RS200 PRO, Rollenhalter, Schneidevorrichtung, USB Stick, Bedienungsanleitung



+49 (0)7181 70 60 - 70

www.icmedical.de
info@icmedical.de